

SILENTIA SKÄRMSYSTEM



Ren design
Flexibel funktion
Låt dagsljuset flöda in





Hygienisk och lätthanterlig avskärmning satt i system

Silentia Skärmsystem är en patenterad avskärmningslösning, som utvecklats för att göra livet lättare på sjukhus och andra vårdinrättningar. Till glädje för både patienter och personal. Det svensktillverkade systemet har sedan introduktionen 1990 skördat stora framgångar och bidrar idag till snabb och effektiv avskärmning inom vården – världen över.

Skärmarna tillgodoser flera behov. De monteras utan att störa takliftar och annan apparatur, finns alltid på plats och släpper in dagsljus. Enkelheten är en annan fördel, som understryks av *EasyClean™*, *EasyReturn™* och *EasyClick™* – tre funktioner som bidrar till optimal hygien, flexibilitet och ett smidigt handhavande. Med en genomtänkt design och ett brett utbud av höjder, längder och färger, passar skärmarna dessutom in i de flesta vårdmiljöer.

Systemets produkter utvecklas ständigt. Till nyheterna nu hör Daylight, frostade skärmar som ger ökat ljusinsläpp. Därtill finns bl.a. fasta sektioner som möjliggör att bygga ett rum i rummet utan ingrepp i väggarna, större gavelskärmar och en ny smidig vagn för mobilt bruk.

Genom systemets mångfald och utbyggbarhet är du aldrig begränsad, vilket stämmer väl överens med det övergripande syftet: "Skärma av utan att stänga in".

Vårt koncept 4-11

Intelligent design 12

Silentia Skärmsystem 14

Nyhet! Daylight 16

Nyhet! Fasta Skärmar 18

Mobila Skärmar 20

Viskärmar
Teknisk information 22

Fasta Skärmar
Teknisk information 24

Montage och tillbehör 26

Färger och mönster 28

Företaget Silentia 30

Optimerar rumsöversikten o

En Silentia-skärm tillvaratar patienternas integritet utan att inverka på personalens överblick och möjlighet till ögonkontakt med varandra. Detta upplevs särskilt positivt på intensivvårds- och uppvakningsavdelningar där personalen också behöver ha fri sikt över övervakningsapparaturen. Samtidigt tillåts dagsljuset att flöda in i lokalen.

Eftersom varje skärm kan vinklas i sidled, är det lätt att öka utrymmet runt en sängplats om vårdinsatsen så kräver. Önskas extra avskildhet kan du komplettera med en mobil gavelskärm.

Skärmarna kan fås i ett flertal höjder – allt för att svara upp mot behoven som gäller på just din avdelning.



ch bibehåller integriteten



Inbyggd flexibilitet för besök



eller en stunds vila



Vårt skärmsystem är en praktisk hjälp i vardagen, som gör det lätt att anpassa rummet efter olika situationer. Under vårdinsatser eller besök kan en sängplats snabbt skärmas av för att ge övriga patienter en lugn och trivsamt miljö.

En fast skärm mellan sängarna i kombination med utdragbara vikskärmar vid fotändan ger ett effektivt utnyttjande av lokalen. Vikskärmen är lätt att dra ut vid undersökningar, dialys eller för en stunds vila, och lika lätt att vika ihop efter avslutad behandling, liksom vid städning eller när rummet står tomt.

Samtliga fasta och vikbara skärmar kan fås i ett flertal höjder och längder. Denna bredd bidrar till att systemet fungerar i praktiken, även i vårdens vardag.



Som gjort för speciella behov

Enkelhet är ett av nyckelorden i vår produktutveckling. Det ska vara lätt att skärma av runt patienterna när de i känsliga lägen vill få en stund för sig själva. Det ska också vara lätt att variera och bygga ut systemet – av den anledningen är samtliga delar formgivna för att passa ihop med varandra.

Lika lätt är det att skapa en mobil skärm. Genom *EasyClick* kan en väggmonterad skärm enkelt kopplas loss och fästas på en vagn för att användas som tillfällig avskärmning på annan plats. Med vårt skärmsystem behöver du alltså aldrig känna dig låst. Istället har du tillgång till ett effektivt redskap, som snabbt förvandlar ett öppet rum till en avskild miljö – när och där du eller dina patienter så önskar.



– dina och dina patienters



Ett system som är tilltalande




för både unga och gamla

Att patienter delar rum, betyder inte att de vill dela allt. En vikskärm monterad mellan sängarna, gör det relativt lätt att värna om patienternas integritet och värdighet. Allt som behövs för att ge avskildhet är ett enkelt handgrepp. I patientrum kan skärmen även placeras kring ett tvättställ för att avskärma omvärlden vid personlig hygien.

Våra produkter bidrar också till att förbättra trivseln i olika undersökningssituationer. Notera gärna det lekfulla mönstret på skärmen som syns på bilden nedan. Mönstret är ett exempel på Print Collection och framtaget speciellt för kliniker och mottagningar som arbetar med barn. Vill du veta mer om möjligheten för tryckta motiv är du välkommen att kontakta oss.



Intelligent design för optimal

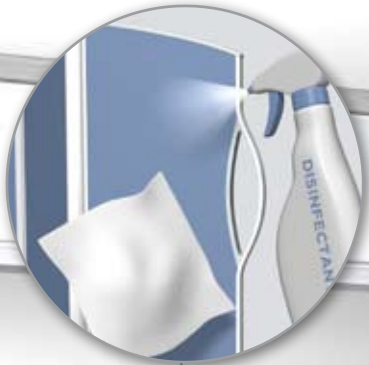

A EasyClean



B EasyReturn



C EasyClick



D Daylight

E

G

användning och hygien



A. Optimal hygien – det är EasyClean™

Skärmen har släta ytor som tål de desinfektionsmedel som används inom vården. De inkapslade hjulen kan enkelt dras ur och tvättas i diskmaskin. Produkterna uppfyller strikta hygienkrav och alla ytor är lättåtkomliga för rengöring – det är EasyClean.

B. Ergonomisk design ger enkel hantering – EasyReturn™

Lika lätt att vika ihop som att dra ut – den lätthanterliga skärmen återgår alltid till utgångsläget, vilket bidrar till den ergonomiska funktionen EasyReturn.

C. Monterad eller mobil – variera enkelt med EasyClick™

En väggmonterad skärm kan även fästas på vagn för mobilt bruk eller på andra enheter i systemet. Denna valfrihet i användningen möjliggörs av EasyClick, som innebär att skärmen kopplas loss och sätts fast med ett enkelt handgrepp.

D. Skärmytor med olika utseenden

Det estetiska intrycket är viktigt för trivselen. Därför finns våra skärmar i en mängd olika utseenden. En nyhet är Daylight – frostade skärmsektioner som släpper in extra mycket dagljus.

E. Stor valfrihet vad gäller höjd och längd

Systemets skärmar finns att beställa i flera höjder och längder – allt för att kunna anpassas efter olika vårdssituationer och rumsdispositioner. Den lägre höjden ger god överblick i rummet och samtidigt ökad trygghet för båda parter.

F. Detaljer som andas kvalitet

En avancerad lättviktskonstruktion med integrerat handtag, fjädrande hjulupphängning och hjul av högsta klass. Det är bara några uttryck för systemets kvalitetsprägel.

G. Brandklassifikation

Skärmsystemet är brandklassificerat enligt europeisk norm.

Silentia Skärmsystem är lätt a


Silentia erbjuder är en komplett lösning på sjukvårdens avskärmningsbehov. Eftersom systemets olika skärmar passar ihop och är utrustade med **EasyClick**, kan du enkelt flytta en skärm från vägg till vagn – eller kombinera en fast och en vikbar skärm – för att få maximal nytta av systemets möjligheter.

Vikskärmar

Se sidorna 22–23 för mer information

STANDARDUTFÖRANDE – MONTERAS DIREKT PÅ VÄGG

Väggfästet möjliggör enkel montering.

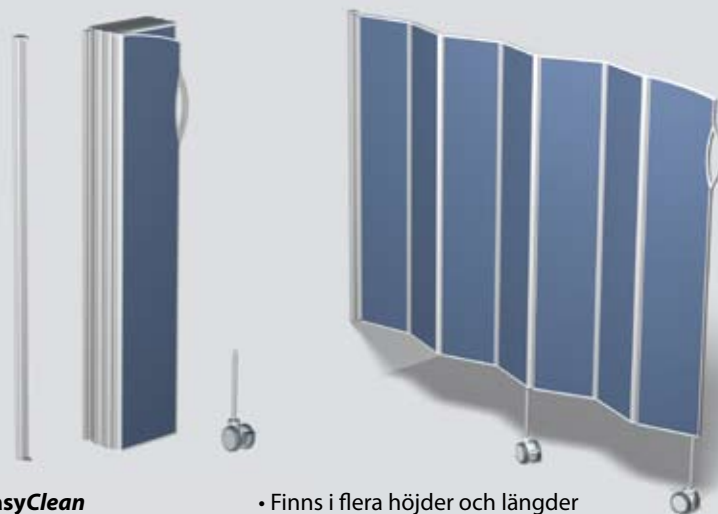

- Optimal hygien – **EasyClean**
- Lätt att manövrera – **EasyReturn**
- Snabbt montage – **EasyClick**

- Finns i flera höjder och längder
- Tillverkas i återvinningsbart material
- Brandklassificerad



MONTERING PÅ IVA-SKENA

Kloven används när skärmen fästs på IVA-skena för att vara flyttbar i sidled. Om skärmen är längre än 2,25 m används två IVA-skenor.



STOLPE FÖR GOLVMONTAGE

Förankras i golvet. Används i situationer när skärmen ska vara fristående i rummet.

tt anpassa till din vårdmiljö



VÄGGMONTERING MED DISTANS

Används när skärmen måste fästas en bit ut från väggen, t.ex. för att ge utrymme för en vårdpanel.



MONTAGE PÅ VAGN

Om skärmen fästs på vagn får du snabbt en mobil avskärmning.

Fasta skärmar

Se sidorna 24–25 för mer information



EASYCLICK

Även fasta skärmar kan monteras snabbt med vårt EasyClick-system.

- Optimal hygien – **EasyClean**
- Snabbt montage – **EasyClick**
- Finns i två höjder: 1,45 m och 1,85 m
- Två längder: 1,3 m och 2,4 m
- Tillverkas i återvinningsbart material
- Brandklassificerad

Mobila gavelkskrmar

Se sidorna 20–21 för mer information



FLEXIBEL AVSKÄRMNING FÖR MOBILT BRUK


Dessa skärmar används fristående för att ge extra avskärmning vid sänggaveln, i korridorer eller vid omklädning. Finns i två utföranden med olika breddmått – 1,5 m och 2 m. Båda finns i höjderna 1,55 m och 1,85 m.

Daylight – skärmen som släp

DAYLIGHT PÅ VIKBARA SKÄRMAR


Daylight är en innovativ skärm-lösning, som både ger en ljusare arbetsmiljö och öppnar för fler inredningsmöjligheter. Med sin frostade design ger Daylight-skärmen ett lika fullgott insynskydd som våra övriga vikskärmar, skillnaden är att Daylight släpper igenom mer dagsljus.

Skärmen tillverkas i slagtålig polykarbonat och finns både som helskärm – Daylight – och i kombination med färgade sektioner, se Daylight Top och Daylight Duo.

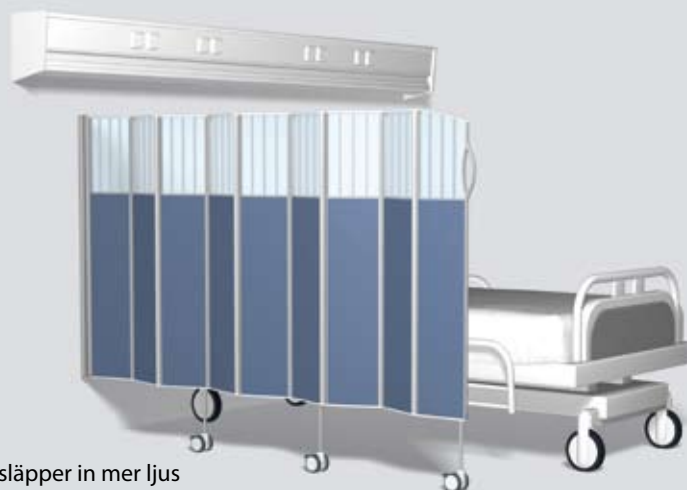


DAYLIGHT TOP

En frostad överdel släpper in mer ljus i rummet och gör att skärmen upplevs som lägre.

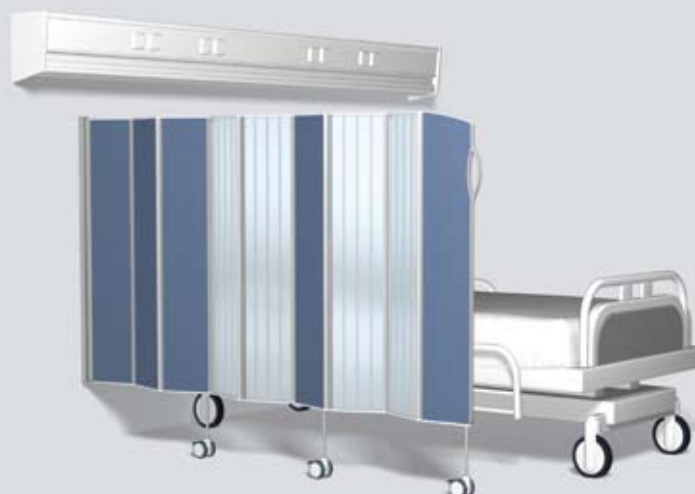

DAYLIGHT DUO

De frostade sektionerna sitter parvis. Närmast väggen används färgade sektioner för att skärma av för exempelvis sänglampa.

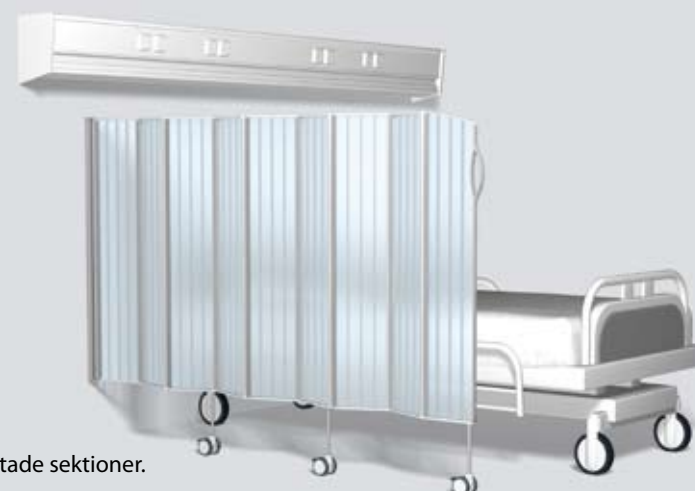

DAYLIGHT

Helskärm med frostade sektioner.

per in mer dagsljus

DAYLIGHT PÅ FASTA SKÄRMAR

Med sin frostade design ger en fast Daylight-skärm ett lika bra insynsskydd som en färgad eller trämönstrad. Skillnaden är att skärm försedd med Daylight släpper igenom mer dagsljus, vilket i sig ökar trivseln längre in i rummet. De fasta skärmarna har tunna glasklara dekorationslinjer som ger ett spännande och exklusivt utseende.

Daylight fast skärm kan fås i helt eller delvis frostat utförande enligt bilderna nedan – välj den variant som passar din arbetsmiljö bäst.



DAYLIGHT TOP, FAST

Den frostade överdelen släpper in mer ljus och gör att skärmen upplevs som lägre.



DAYLIGHT DUO, FAST

En kombination av frostade och färgade sektioner. Den färgade delen närmast väggen skärmar av för sänglampa.



DAYLIGHT, FAST

Helskärm i frostat utförande.

Fasta Skärmar med inbyggd

SILENTIA FASTA SKÄRMAR

Vår fasta skärm är utvecklad för miljöer där en mer permanent avskärmning önskas. Samtidigt medger systemet flera variationsmöjligheter. En fast skärm mellan sängarna kan t.ex. kombineras med en utdragbar vikskärm vid fotänden. Den fasta skärmen möjliggör också byggandet av omklädningshytter och andra typer av rum i rummet, utan ingrepp i väggarna.

Den fasta skärmen monteras med EasyClick i både vägg och golv och blir mycket stabil. Finns som standard i höjderna 1,45 m och 1,85 m samt i två längder: 1,3 m och 2,4 m. Sektioner i olika höjd och utseende kan kombineras fritt.



SILENTIA FAST SKÄRM.

Monteras med väggfäste och golvstolpe för maximal stabilitet.



EN FAST SKÄRM I KOMBINATION MED DUBBLA VIKSKÄRMAR VID FOTÄNDEN


flexibilitet

SILENTIA SKÄRM- FÖRLÄNGNING

I vissa fall kan vikskärmen behöva förlängas för att nå runt fotänden på sängen. Då monteras en fast skärmförlängning närmast väggen, som i sin tur utgör fästpunkt för vikskärmen.

Om det är trångt i rummet, kan sängbordet vara i vägen när skärmen viks ihop. Även då används skärmförlängningen för att flytta ut vikskärmen en bit från väggen.

Skärmförlängningen kan vinklas mot väggen för att underlätta vid städning. Finns med olika mått för att alltid komma förbi sängbordet, även när vikskärmen i sig vikts ihop.

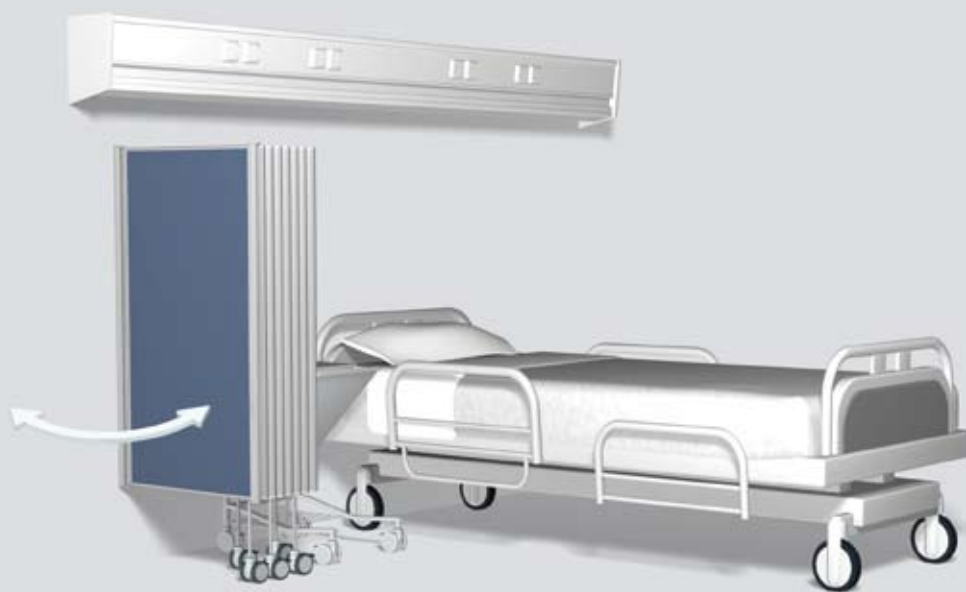

Mobila Skärmlösningar för


SILENTIA SKÄRMSYSTEM ERBJUDER EN MÄNGD MOBILA MÖJLIGHETER

Med Silentia Skärmsystem är du aldrig låst. Vårt sortiment av mobila enheter gör det lätt att skapa en tillfällig, fristående avskärmning varhelst behoven uppstår. Snabbt och effektivt – och alltid med patienternas bästa i fokus.



SILENTIA SKÄRMVAGN

En vikskärm placerad på vagn ger överlägsen flexibilitet.

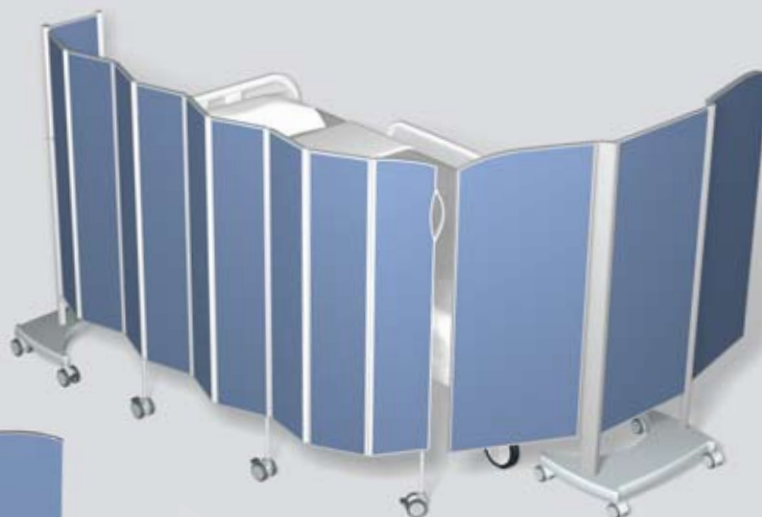




SILENTIA GAVELSKÄRM 1,5 M

Ett effektivt insynsskydd vid sänggaveln – eller vid omklädning. Bredd utfälld: 1,5 m. Höjd: 1,55 m och 1,85 m.

fristående avskärmningar

SILENTIA SKÄRMVAGN

Vagnen passar till vikskärmar i olika längder – från 5 till 13 sektioner. Höjd: 1,45 m och 1,85 m.

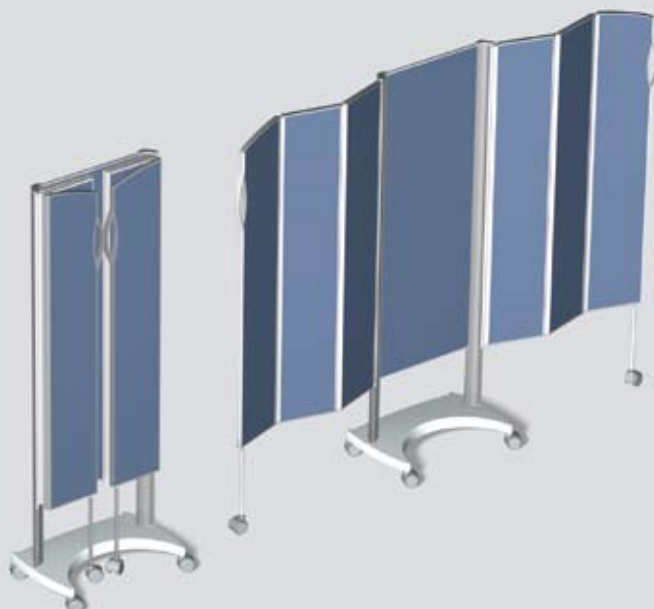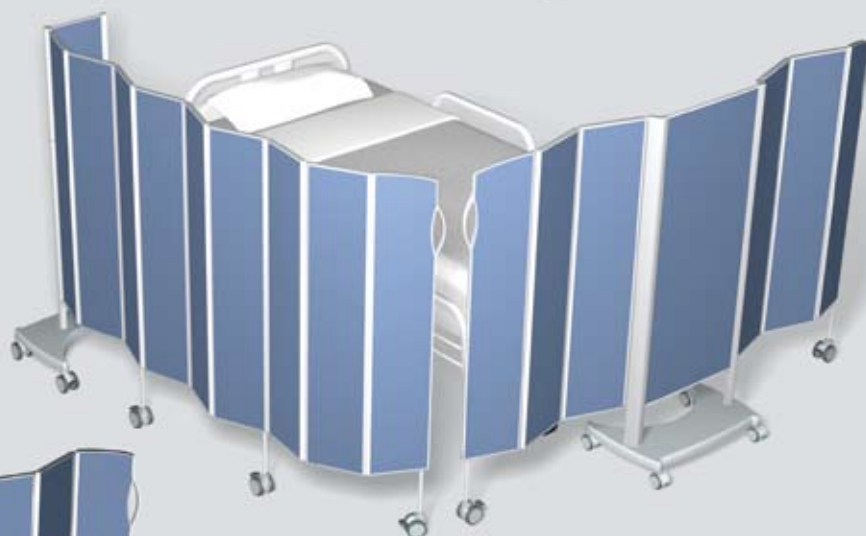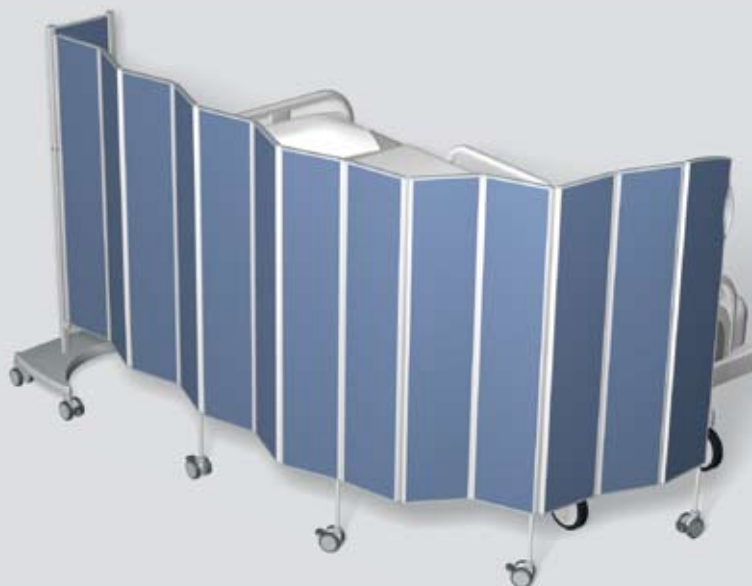


SILENTIA GAVELSKÄRM 2,0 M

Den nya gavelskärmen kan med fördel användas när en längre avskärmning önskas. Bredd utfälld: 2,0 m. Höjd: 1,55 m och 1,85 m.

Silentia Vikskärmar

STANDARDSTORLEKAR

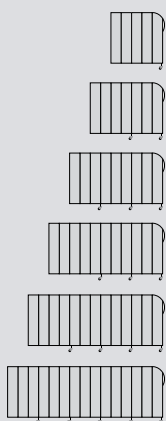

ANTAL SEKTIONER	ART. NR. FÄRGAT	ART. NR. DAYLIGHT TOP	ART. NR. DAYLIGHT DUO	ART. NR. DAYLIGHT	LÄNGD	HÖJD	MÅTT IHOPVIKT	
							BREDD	DJUP
5	6105 6305	6105-DT 6305-DT	6105-DD 6305-DD	6105-D 6305-D	1,25 m	1,45 m	0,3 m	0,1 m
					1,25 m	1,85 m	0,3 m	0,1 m
7	6107 6307	6107-DT 6307-DT	6107-DD 6307-DD	6107-D 6307-D	1,75 m	1,45 m	0,3 m	0,14 m
					1,75 m	1,85 m	0,3 m	0,14 m
9	6109 6309	6109-DT 6309-DT	6109-DD 6309-DD	6109-D 6309-D	2,25 m	1,45 m	0,3 m	0,18 m
					2,25 m	1,85 m	0,3 m	0,18 m
11	6111 6311	6111-DT 6311-DT	6111-DD 6311-DD	6111-D 6311-D	2,75 m	1,45 m	0,3 m	0,22 m
					2,75 m	1,85 m	0,3 m	0,22 m
13	6113 6313	6113-DT 6313-DT	6113-DD 6313-DD	6113-D 6313-D	3,25 m	1,45 m	0,3 m	0,26 m
					3,25 m	1,85 m	0,3 m	0,26 m
15	6115 6315	6115-DT 6315-DT	6115-DD 6315-DD	6115-D 6315-D	3,75 m	1,45 m	0,3 m	0,3 m
					3,75 m	1,85 m	0,3 m	0,3 m

Tabellen visar våra standardstorlekar med 0,5 m längdintervall. Skärmen kan även fås i intervall om 0,25 m om total-längden ligger mellan 0,75 m och 3,75 m. Båda standardhöjderna 1,45 m och 1,85 m kan varieras i höjd $\pm 0,1$ m genom anpassning av hjulbenen. Hjulbenens höjd bestäms vid din beställning.


VÄLJ RÄTT INFÄSTNING VID DÖRRPOST

(A) Vikskärmens infästning sitter normalt på vänster sida, vilket innebär att den viks ihop till höger om väggfästet.
(B) För att inte stjåla onödigt mycket plats t.ex. invid en dörrpost, kan skärmen även beställas med spegelvänd infästning.


A




B

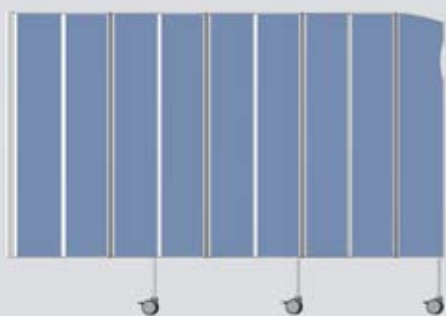


FÄRGAD SKÄRM

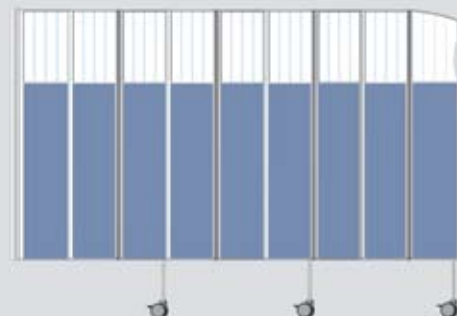

DAYLIGHT TOP
Överdelen är 0,45 m hög.

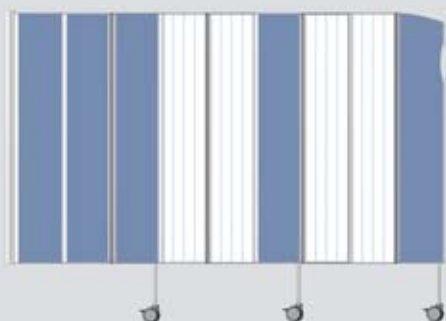

DAYLIGHT DUO
De frostade sektionerna ligger parvis.

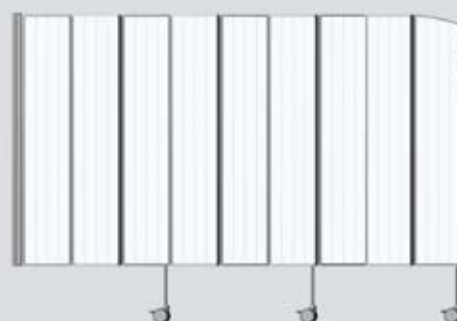

DAYLIGHT




SILENTIA GAVELSKÄRM 1,5 M

Art. nr 6522, höjd 1,55 m

Art. nr 6523, höjd 1,85 m

Bredd utfälld 1,5 m, bredd ihopvikt 0,55 m.

Skärmen är avsedd för situationer när en fristående skärm behövs t.ex. vid omklädning eller vid sänggavlar. Hjulstativet är lågt och smidigt utformat. *Denna skärm finns ej som Daylight utförande.*

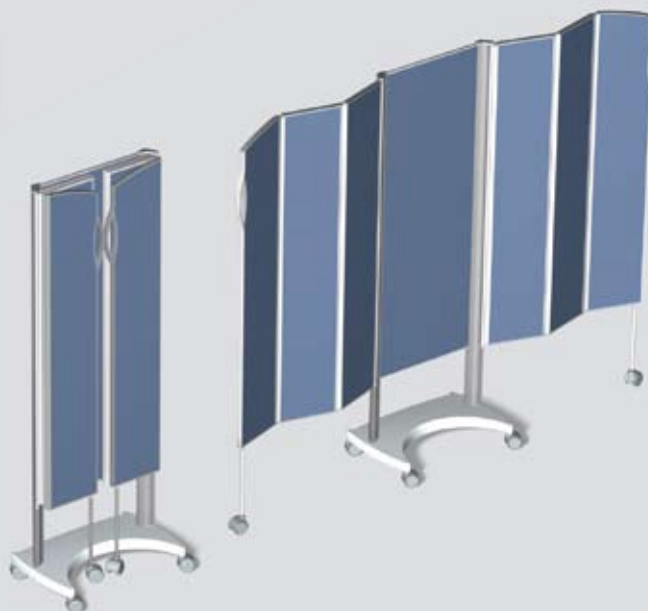

SILENTIA GAVELSKÄRM 2,0 M

Art. nr 6525, höjd 1,55 m

Art. nr 6526, höjd 1,85 m

Bredd utfälld 2,0 m, bredd ihopvikt 0,55 m.

Ett effektivt insynsskydd vid sänggaveln, i korridorer eller vid omklädning. Hjulen låses när skärmen är utvikt. Hjulstativet är lågt och utformat för bästa funktion. *Denna skärm finns ej som Daylight utförande.*

SILENTIA EASYCLICK

Montering och flyttning av skärmen sker med ett enkelt handgrepp.



SILENTIA EASYRETURN

Ergonomisk och intelligent design gör skärmen lätt att vika ihop.




SILENTIA RÖNTGENSKÄRM

Art. nr 6105xray, längd 1,25 m, höjd 1,45 m, färg ljus beige

Art. nr 6107xray, längd 1,75 m, höjd 1,45 m, färg ljus beige

Art. nr 6109xray, längd 2,25 m, höjd 1,45 m, färg ljus beige


Används för tillfällig avskärmning av röntgenstrålar t.ex. på akutintag och intensivvårdsavdelningar. Skärmen finns i tre längder – 1,25 m, 1,75 m och 2,25 m. Skärmen kan monteras på vägg eller på vagn för mobilt bruk. Pb-värde 0,4 mm.

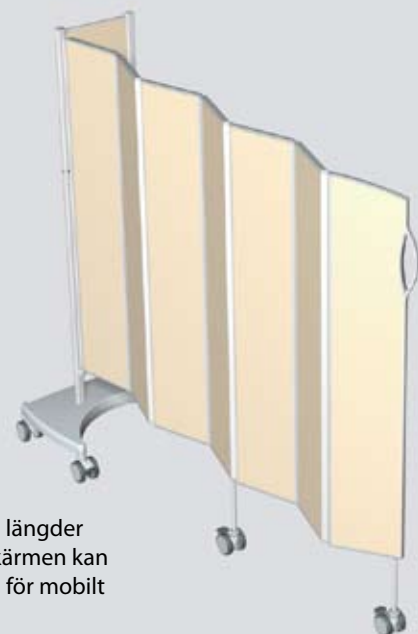

Silentia Fasta Skärmar

STANDARDSTORLEKAR

LÄNGD	HÖJD	ART. NR. FÄRGAT	ART. NR. DAYLIGHT TOP	ART. NR. DAYLIGHT TOP DUO	ART. NR. DAYLIGHT	ART. NR. DAYLIGHT DUO
1,3 m 1,3 m	1,45 m 1,85 m	6150 6350	6150-DT 6350-DT	– –	6150-D 6350-D	– –
2,4 m 2,4 m	1,45 m 1,85 m	6155 6355	6155-DT 6355-DT	6155-DTD 6355-DTD	6155-D 6355-D	6155-DD 6355-DD

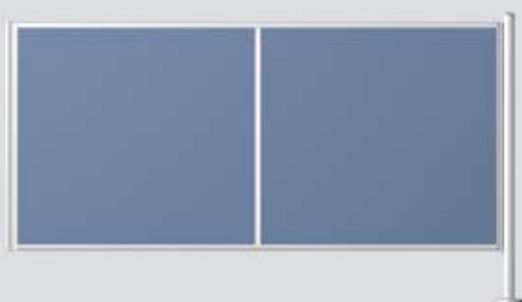

SILENTIA EASYCLICK

Skärmen monteras
och kopplas loss
med ett enkelt
handgrepp.




FÄRGAD SKÄRM, FAST



DAYLIGHT TOP, FAST

DAYLIGHT TOP DUO, FAST

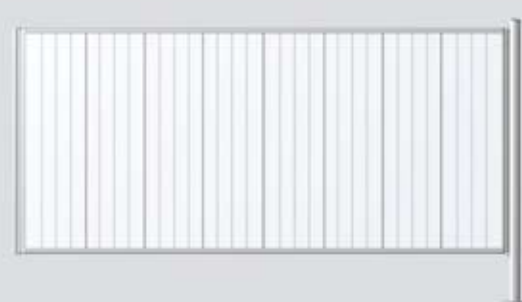

DAYLIGHT, FAST

DAYLIGHT DUO, FAST

SILENTIA GOLVMONTAGE

En golvstolpe i grundutförande **(A)** används för att montera den fasta skärmen med EasyClick. Vill du att stolpen ska utgöra fästpunkt för ytterligare fasta eller vikbara skärmar, finns den i fler utföranden **(B–D)** med upp till fyra infästningspunkter.




Stolpen förankras normalt i golvet för bästa stabilitet – detta är särskilt viktigt om den ska bära ytterligare minst en skärm. Om stolpen endast är avsedd att stödja en enda väggfäst skärm, kan den dock stå löst på golvet.

STANDARDSTORLEKAR

HÖJD	ART. NR.	ART. NR.	ART. NR.	ART. NR.
1,45 m	6561-A	6561-B	6561-C	6561-D
1,85 m	6563-A	6563-B	6563-C	6563-D

• Golvstolpens infästningsmöjligheter – sedda uppifrån.

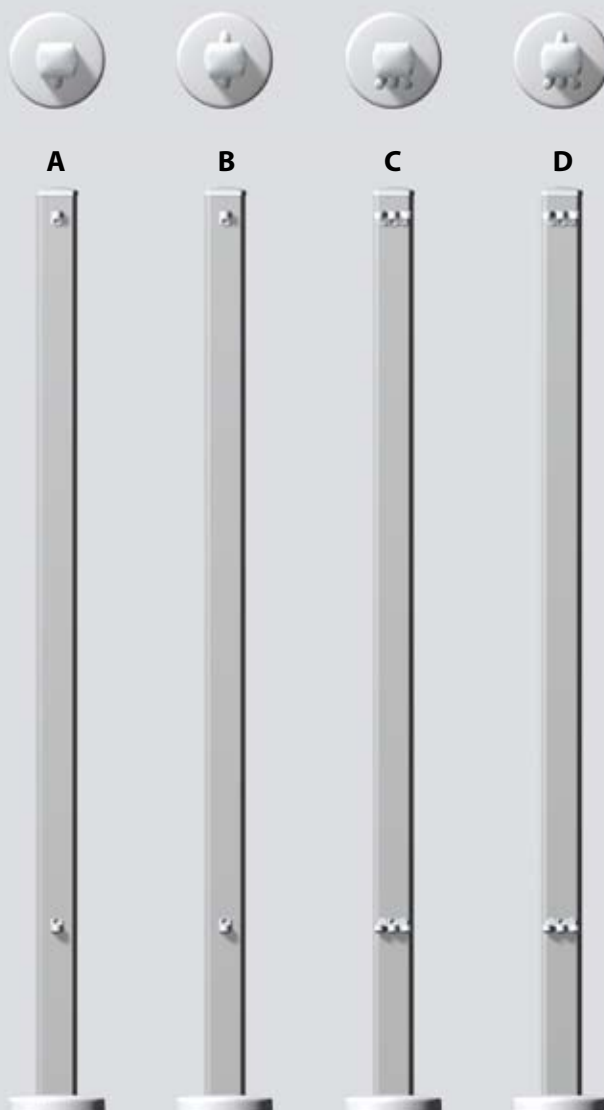

- Stolpen har en tilltalande design och släta ytor som är lätta att rengöra.
- Stolpfotens täcklock har en slät yta som är lätt att hålla ren.

Enkelt montage genom ett bre



EasyClick

underlättar monteringen av både fasta och vikbara skärmar



Alla fasta och vikbara skärmar monteras snabbt och enkelt med EasyClick, oavsett om de ska fästas på vägg, på vagn eller på golvstolpe. Det faktum att skärmarna sätts fast och kopplas loss med ett enkelt handgrepp underlättar inte bara monteringen – det ger även utrymme för en stor flexibilitet i användningen.

VÄGGFÄSTE

Art. nr 6539, höjd 1,45 m
Art. nr 6540, höjd 1,85 m

För smidig montering direkt på väggen. Ett väggfäste medföljer normalt tillsammans med skärmen. Extra väggfäste beställs separat.

VÄGGFÄSTE MED GOLVSTÖD

Art. nr 6537, höjd 1,45 m
Art. nr 6538, höjd 1,85 m
Väggfästet ger stöd mot golvet vid montage med klove.

Kan vid behov vändas för montering på IVA-skena som är placerad ovanför skärmen.

VÄGGFÄSTE MED GOLVSTÖD OCH FÖRLÄNGNING UPPÅT

Art. nr 6541, höjd 1,45 m
Art. nr 6542, höjd 1,85 m
Väggfästet används med klove när IVA-skena sitter över skärmen.

GOLVSTOLPE

Art. nr 6561A, höjd 1,45 m
Art. nr 6563A, höjd 1,85 m

Golvstolpen kan både fungera som stöd åt en väggfäst skärm och som fästpunkt för vikskärmar. Stolpen skruvas fast i golvet. Ytterligare varianter finns på sidan 25.

SKÄRMVAGN

Art. nr 6514, höjd 1,45 m
Art. nr 6520, höjd 1,85 m
Tillbehör för vikskärmar upp till 13 sektioners längd. Skärmen monteras med EasyClick.

SKÄRMFÖRLÄNGNING

Flyttar ut vikskärmens fästpunkt från väggen, antingen för att ge plats för sängbordet eller för att förlänga en vikskärm. Finns i fyra längder och två höjder.

HÖJD	ART. NR. LÄNGD 0,5 M	ART. NR. LÄNGD 0,75 M	ART. NR. LÄNGD 1,0 M	ART. NR. LÄNGD 1,2 M
1,45 m	6162	6163	6164	6165
1,85 m	6362	6363	6364	6365

ett urval av anpassade tillbehör



STANDARDKLOVE FÖR IVA-SKENA

Art. nr 6502

För infästning på IVA-skena. En flexibel lösning som medger att skärmen kan flyttas i sidled på IVA-skenan. Distansmått mellan IVA-skena och skärm: 40 mm.



DISTANS 20 mm

Art. nr 6506

Används för att flytta ut skärmen från väggen t.ex. för att komma utanför en list. Levereras parvis.



STÖDKLOVE

Art. nr 6524

Används tillsammans med standardklove 6502 vid de tillfällen då två IVA-skenor finns monterade på väggen.



DISTANS 100 RESP. 200 mm

Art. nr 6507, 100 mm

Art. nr 6508, 200 mm

Används för utflyttning av skärmen från väggen. Levereras parvis.



KLOVE MED DISTANS

Art. nr 6535

En lösning då ett mellanrum mellan skärm och IVA-skena önskas, t.ex. på dialysavdelningar där man behöver komma åt panelen. Distansmått mellan IVA-skena och skärm: 150 mm.



JUSTERBAR DISTANS

Art. nr 6509, 200–350 mm

Art. nr 6510, 300–500 mm

Används för utflyttning av skärmen långt från väggen. Levereras styckvis.



JUSTERBAR KLOVE

Art. nr 6516

Tar upp olika avstånd mellan övre och undre IVA-skena. Kloven är justerbar mellan 0 och 150 mm.



STÖD BAKÅT MOT VÄGG

Art. nr 6519

Kan användas som stöd bakåt som komplement till klove vid montering på IVA-skena.

Exempel på montering

I systemet ingår en rad färdiga installationslösningar för montering på IVA-skena.



STANDARDKLOVE

Art. nr 6502

Används i de flesta fall ensam vid montage på IVA-skena. Vid stora skärmar eller vid speciella tillfällen kan man komplettera med stödklove eller justerbar klove.



STÖDKLOVE (UNDERST)

Art. nr 6524

Används tillsammans med standardklove 6502 vid de tillfällen då två IVA-skenor finns monterade på väggen parallellt med varandra.



KLOVE MED DISTANS

Art. nr 6535

Bra för de tillfällen då man önskar ett mellanrum mellan skärm och IVA-skena, t ex på dialysavdelningar där man behöver komma åt försörjningspanelen. Standardmått 150 mm, andra mått kan levereras på begäran.



JUSTERBAR KLOVE (UNDERST)

Art. nr 6516

Denna klove tar upp olika avstånd mellan den övre och undre IVA-skenan. Kloven är justerbar mellan 0 och 150 mm. Används tillsammans med standardklove 6502.



DISTANS

100 mm – Art. nr 6507

200 mm – Art. nr 6508

Flyttar ut skärmen 100 mm eller 200 mm. Lämplig att använda när t ex en försörjningspanel, el-, gas- eller strömbrytare sitter bakom skärmen. Ger utrymme för slangar och sladdar bakom skärmen.



JUSTERBAR DISTANS

200 – 350 mm – Art. nr 6509

300 – 500 mm – Art. nr 6510

Flexibel distans att använda då skärmen behöver flyttas ut långt ifrån väggen t ex då en hylla eller en djup försörjningspanel sitter bakom skärmen.

Ett brett spektrum av färger



VIT



FOREST



OCEAN



TROPICAL



PAPYRUS



VALNÖT



BJÖRK



LIME

och utseenden




SAVANNAH

Silentia Skärmsystem kännetecknas av stora variationsmöjligheter i användningen. Denna bredd återspeglas på valfriheten vad gäller skärmsektionernas utseende.

Våra skärmar finns i ett flertal olika färger och mönster för att smälta in miljön och bidra till en harmonisk helhet på din avdelning. En nyhet är Daylight, frostade skärmar som ger ett ökat ljusgenomsläpp. En annan nyhet är Print Collection med motiv som sätter fart på barns fantasi.

Samtliga utföranden är anpassade för att matcha konstruktionens aluminiumdetaljer.

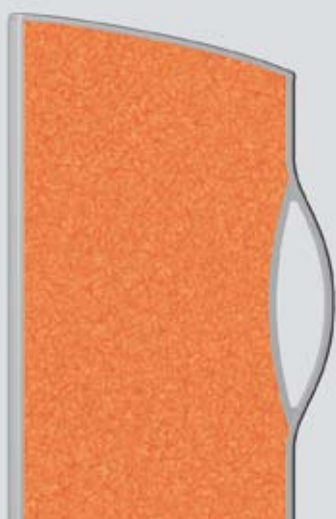

MANDARIN



DAYLIGHT



PRINT COLLECTION

Silentia – en del av din värld



sedan 1989

Silentia är ett svenskt företag som sätter en ära i att utveckla produkter som är nyskapande och effektiva för användning inom vården. Det är en ledstjärna för oss att våra unika produkter har ett stort systemtänkande med smarta funktioner som förenklar användandet och ger stor flexibilitet för kunden.

Vi arbetar hela vägen i egen regi från idé till leveransklar produkt, vilket säkerställer en hög kvalitet och gör det lätt att möta önskemål som kommer från våra kunder.

Vi vill ge våra kunder stor uppmärksamhet och god service, vilket ligger till grund för den långsiktighet vi strävar efter i alla våra relationer. Detta har vi arbetat efter i Silentia sedan starten 1989 och idag finns våra produkter över hela världen.

Dag och Örjan Göranson, grundare och ägare





SKÄRMA AV UTAN ATT STÄNGA IN

Silentia AB • Box 108, 311 22 Falkenberg • Tel 0346-485 80
Fax 0346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.se

MADE IN SWEDEN

Våra produkter är upphovsrättskyddade på olika sätt. Genom mönsterskydd, patent pending och patent.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar. För ytterligare information – besök gärna vår hemsida.

